

守ってね[®]

安心な介護で みんなが笑顔に




原寸大



見守りシステム「守ってね」とは

就寝中の要介護者さまの離床前行動を検知し、ご家族さまへお知らせすることで、**転倒リスク低減、夜間の見守り負荷軽減**に貢献するシステムです。

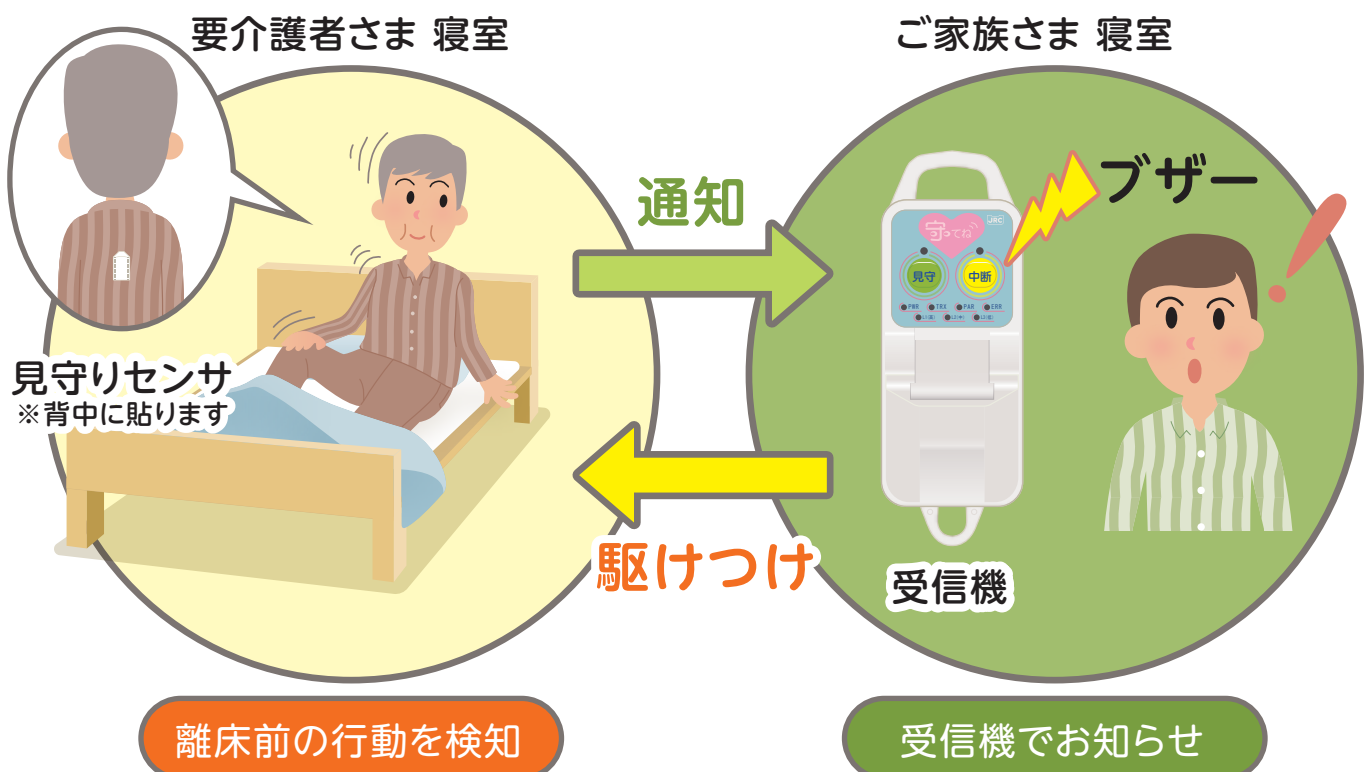

ご家族様寝室

①見守り開始



②離床前をお知らせ




[ポイント]


離床前をお知らせすることで、
要介護者さまの転倒リスクを
低減できます。

要介護者様寝室

①就寝中

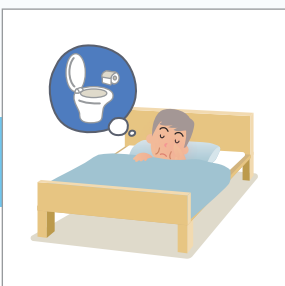


②ベッドから降りようとしている

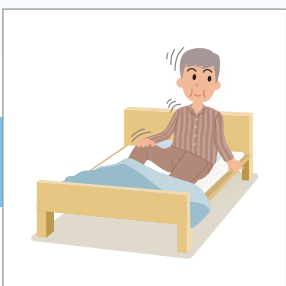

③駆けつけ



④トイレへ誘導

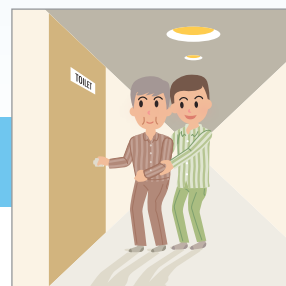

◆就寝前の行動や危険な状態を精度よく検知します。

◆スマートフォンアプリとの連携により、要介護者さまの状態をリアルタイムで確認できます。

●製品仕様

本製品は、介護保険でレンタルすることが可能な介護保険対象モデルと複合機能付きモデルがあります。
介護保険対象モデルは、徘徊につながる行動のみを検知し、お知らせするシンプルモデルになります。

■見守りセンサ

外形寸法(H×W×D)	57 × 32 × 4.9mm
バッテリー	動作時間 約 1週間(7日) ^{※4} 充電時間 約 3時間
充電方式	ワイヤレス充電 受信機にて充電可能
重量	10g

■受信機

外形寸法(H×W×D)	154 × 55 × 20mm (フック部含む)
電源	AC100V
重量	85g

■スマートフォン専用アプリケーション機能

①	要介護者さまの睡眠姿勢の確認 ^{※2}
②	要介護者さまの離床前行動や危険状態の通知確認
③	見守りパラメータの設定変更

■判別姿勢^{※2}

①	仰向け(仰臥位) / 横向き(側臥位)
②	横向きで上体を起こす / ベッドで体を起こし、座った状態(半座位、長座位)
③	うつ伏せ(伏臥位)

■検知動作(ブザーで通知)

①	判別姿勢の②の状態で一定時間 ^{※1} 以上、身体を動かしている(離床前)
②	うつ伏せの状態ですら一定時間 ^{※1} 以上、身体の動きがない ^{※3}
③	仰向きの状態で一定時間 ^{※1} 以上、寝返りなどの動きがない ^{※3}
④	立ち上がる(離床)
⑤	転倒する
⑥	受信機の傍から移動する(離れる) ^{※5}

※1. 時間は受信機、スマートフォンから設定可能です。

※2. 介護保険対象モデルでは、通知発生時のみ状態が表示されます。

※3. 介護保険対象モデルでは対象機能は使用できません。

※4. 1日あたり8時間、就寝中の要介護者さまを対象に見守りを実施した場合。

※5. 検知する移動距離はご自宅の環境(建物構造等)により異なります(約5~30m)

[ポイント] 要介護者さまの介護状況に合わせて、ブザーで通知したい検知動作を自由に選択できます。

※「守ってね」は上田日本無線株式会社の登録商標です。

TAISコード:02044-000001 介護保険 レンタル対象品

●お問い合わせ先

上田日本無線株式会社

本社 〒386-8608 長野県上田市踏入2-10-19

事業本部 マーケティング部 営業グループ



TEL 0268-26-2079 FAX 0268-26-2072

URL ◆<https://www.ujrc.co.jp/>